

FH020-1036#FFP2口罩

3只装

技术要求


材质：OPP复合膜（15s±1s）

颜色：如图

尺寸：225x130mm

注：灰色部分为透明封边，哑光白底。

批号/生产期根据实际生产进行印刷或者喷码



Masque Antipoussières
Mascherine Antipolvere

Particle Filtering Half Mask
EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR

TK-3

INSTRUCTIONS D'UTILISATION / ISTRUZIONI PER L'USO

Étape 1: Retirez le masque de l'emballage individuel, assurez-vous que la barrette nasale est positionnée au niveau du nez et tournée vers l'extérieur.

Étape 2: Placez le masque sur votre nez et votre bouche. Placez les boucles en toute sécurité autour des oreilles.


Étape 3: Appuyez doucement sur la barrette nasale pour l'adapter à l'arête du nez, puis ajustez le masque pour vous assurer qu'il couvre le nez, la bouche et le menton.

Passaggio 1: rimuovere la maschera dalla confezione singola, assicurarsi che il nasello sia posizionato sul naso e rivolto verso l'esterno.

Passaggio 2: posizionare la maschera sul naso e sulla bocca. Posizionare saldamente gli elastici intorno alle orecchie.

Passaggio 3: premere delicatamente il nasello per adattarlo al ponte del naso, quindi effettuare la regolazione per assicurarsi che la maschera copra il naso, la bocca e il mento.

NON-MEDICAL

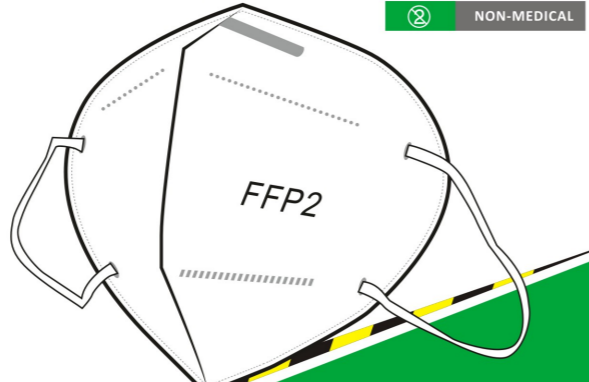

Ref. PRPROTMP02

Importé par Ribimex SA
56 Route de Paris - RN4
FR-77340 MONTAULT-COMBAULT
Fabriqué en R.P.C. -
N° de lot :

CE 1463 **www.ribimex.com**

UTILISATION
L'utilisation du masque de protection est conseillée voire obligatoire lorsque votre travail ou votre environnement de travail comporte un risque lié aux poussières et aux aérosols liquides non toxiques.

USO
L'uso di una maschera protettiva è consigliato o addirittura obbligatorio quando il tuo lavoro o il tuo ambiente di lavoro comporta dei rischi legati alla presenza di polvere e di aerosol liquidi non tossici.

CONTRE-INDICATIONS
Le produit contient des tissus non tissés. À utiliser avec prudence pour ceux qui sont allergiques aux tissus non-tissés.

CONTRAINDICAZIONI
Il prodotto contiene tessuto non tessuto. Da usare con cautela in caso di allergia a questo materiale.

CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR
Contrôle de la pression positive: appuyez doucement sur le masque avec les deux mains, puis expirez. L'air ne devrait pas sortir des bords du masque.
Contrôle de la pression négative: appuyez doucement sur le masque avec les deux mains, puis inspirez. Le centre du masque doit légèrement s'enfoncer.
En cas de fuite, ajustez la position de la barrette nasale et vérifiez à nouveau.

CONTROLLO DELLA TENUTA DELL'ARIA
Controllo della pressione positiva: premere delicatamente la maschera con entrambe le mani, quindi espirare. Non dovrebbero esserci perdite d'aria dai bordi della maschera.
Controllo della pressione negativa: premere delicatamente la maschera con entrambe le mani, quindi inspirare. Il centro della maschera dovrebbe essere leggermente infossato.
In caso di perdite, regolare la posizione del nasello e ricontrollare.


ATTENTION
• Ce produit doit être utilisé uniquement en tant que protections respiratoires de certaines particules. Une mauvaise utilisation peut être cause de maladie, voir entraîner la mort.
• Lisez et comprenez les instructions avant utilisation.
• Reportez-vous à la date d'expiration imprimée sur l'emballage. Ne pas utiliser après la date d'expiration.
• Vérifiez l'intégrité du produit et de l'emballage avant utilisation. S'il est endommagé, jetez-le.
• Ne pas utiliser pour pulvériser de la peinture, en présence de gaz et vapeurs nocifs, d'amiante, ou lors de sablage.
• Limitations d'utilisation:
1. Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Ne pas utiliser dans des atmosphères avec un niveau d'oxygène inférieur à 19,5%.
2. Ne pas utiliser lorsque les concentrations de contaminants sont immédiatement dangereuses pour la vie ou la santé, sont inconnues ou lorsque les concentrations dépassent 10 fois la limite d'exposition autorisée selon les réglementations gouvernementales applicables.
3. Ne modifiez pas, ne détériorez pas, ne nettoyez pas ou n'utilisez pas ce produit à mauvais escient.
4. Ne pas utiliser avec des barbes ou d'autres situations qui empêchent une bonne étanchéité entre le visage et la surface du masque.
5. Les personnes souffrant de maladies respiratoires, cardiovasculaires ou enceintes doivent utiliser ce produit avec prudence.
• Durée d'utilisation: lorsque le masque est endommagé, souillé ou que la respiration devient difficile, quittez la zone contaminée et remplacez le masque.

ATTENZIONE
• Questo prodotto aiuta a proteggere le vie respiratorie da alcuni particolati contaminanti. Un uso improprio può essere causa di malattia o portare alla morte.
• Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
• Fare riferimento alla data di scadenza stampata sulla confezione. Non utilizzare dopo la scadenza.
• Verificare l'integrità del prodotto e della confezione prima dell'uso. Se danneggiato, scartare.
• Non utilizzare per spruzzare vernici, in presenza di gas e vapori nocivi, di amianto, o per lavori di sabbiatura.
• Limitazioni d'uso:
1. Questo prodotto non fornisce ossigeno. Non utilizzare in atmosfere con un livello di ossigeno inferiore al 19,5%.
2. Non utilizzare quando le concentrazioni di contaminanti sono immediatamente pericolose per la vita o la salute, sono sconosciute o quando le concentrazioni superano di 10 volte il limite di esposizione consentito in base alle normative vigenti.
3. Non alterare, danneggiare, lavare o utilizzare in modo improprio questo prodotto.
4. Non utilizzare con barba, peli del viso o con altre condizioni che impediscano una buona tenuta tra il viso e il bordo della maschera.
5. Gli individui con malattie respiratorie, malattie cardiovascolari o donne in gravidanza dovrebbero usare questo prodotto con cautela.
• Durata di utilizzo: quando la maschera è danneggiata, sporca o la respirazione diventa difficoltosa, lasciare l'area contaminata e sostituire la maschera.

ENTREPOSAGE
Le produit doit être stocké dans un environnement sec, propre et bien ventilé, exempt de gaz corrosifs, à l'abri du soleil et des flammes.

CONSERVAZIONE
Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, pulito e ben ventilato, privo di gas corrosivi, al riparo dal sole e da fiamme libere.

LOT R20100212

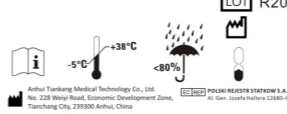

Anhui Rankang Medical Technology Co., Ltd.
No. 228 Xinyu Road, Economic Development Zone,
Tianzhang City 239500 Anhui, China

POLSKA WYPRÓBA I ENERDIA S.A.
ul. Główna 10, 01-030 Warszawa, Polska

3只

FH020-1036#FFP2口罩



技术要求


材质：350g白卡纸+上光

颜色：如图

尺寸：225x130x140mm/21pcs

注：

批号/生产期根据实际生产进行印刷或者喷码

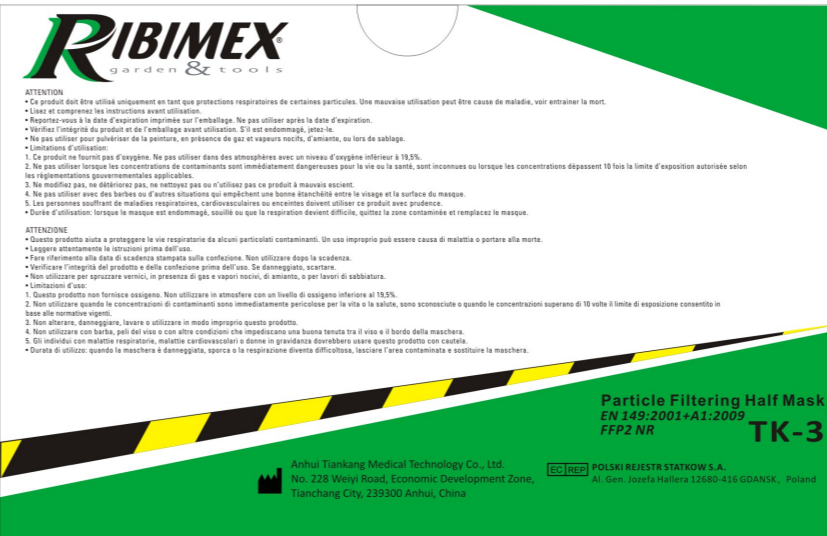

INSTRUCTIONS D'UTILISATION / ISTRUZIONI PER L'USO

- Étape 1: Retirez le masque de l'emballage individuel, assurez-vous que la barrette nasale est positionnée au niveau du nez et tournée vers l'extérieur.
- Étape 2: Placez le masque sur votre nez et votre bouche. Placez les boucles en toute sécurité autour des oreilles.
- Étape 3: Appuyez doucement sur la barrette nasale pour l'adapter à l'arête du nez, puis ajustez le masque pour vous assurer qu'il couvre le nez, la bouche et le menton.

- Passaggio 1: rimuovere la mascherina dalla confezione singola, assicurarsi che il nastro sia posizionato sul naso e rivolto verso l'esterno.
- Passaggio 2: posizionare la mascherina sul naso e sulla bocca. Posizionare saldamente gli elastici intorno alle orecchie.
- Passaggio 3: premere delicatamente il nastro per adattarlo al ponte del naso, quindi effettuare la regolazione per assicurarsi che la mascherina copra il naso, la bocca e il mento.

ATTENTION

- Ce produit doit être utilisé uniquement en tant que protection respiratoire de certaines particules. Une mauvaise utilisation peut être cause de maladie, voir entraîner la mort.
- Lisez et comprenez les instructions avant utilisation.
- Reportez-vous à la date d'expiration imprimée sur l'emballage. Ne pas utiliser après la date d'expiration.
- Vérifiez l'intégrité du produit et de l'emballage avant utilisation. Si un endommagement, jeter-le.
- Ne pas utiliser pour pulvériser de la peinture, en présence de gaz et vapeurs nocifs, d'amianto, ou lors de sablage.
- Limitation d'utilisation
- Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Ne pas utiliser dans des atmosphères avec un niveau d'oxygène inférieur à 19,5%.
- Ne pas utiliser lorsque les concentrations de contaminants sont immédiatement dangereuses pour la vie ou la santé, sont inconnues ou lorsque les concentrations dépassent 10 fois la limite d'exposition autorisée selon les réglementations gouvernementales applicables.
- Ne modifier pas, ne déformer pas, ne nettoyer pas ou n'utiliser pas ce produit à mauvais escient.
- Ne pas utiliser avec des barbes ou d'autres situations qui empêchent une bonne étanchéité entre le visage et la surface du masque.
- Les personnes souffrant de maladies respiratoires, cardiovasculaires ou enceintes doivent utiliser ce produit avec prudence.
- Evitez d'utiliser lorsque le masque est endommagé, souillé ou que la respiration devient difficile, quitte la zone contaminée et remplacez le masque.

ATTENZIONE

- Questo prodotto aiuta a proteggere le vie respiratorie da alcuni particolari contaminanti. Un uso improprio può essere causa di malattia o portare alla morte.
- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Fare riferimento alla data di scadenza stampata sulla confezione. Non utilizzare dopo la scadenza.
- Verificare l'integrità del prodotto e della confezione prima dell'uso. Se danneggiato, scartarlo.
- Non utilizzare per spruzzare vernici, in presenza di gas e vapori nocivi, di amianto, o per lavori di sabbiatura.
- Limitazioni d'uso:
- Questo prodotto non fornisce ossigeno. Non utilizzare in atmosfere con un livello di ossigeno inferiore al 19,5%.
- Non utilizzare quando le concentrazioni di contaminanti sono immediatamente pericolose per la vita o la salute, sono sconosciute o quando le concentrazioni superano di 10 volte il limite di esposizione consentito in base alle normative vigenti.
- Non alterare, danneggiare, lavare o utilizzare in modo improprio questo prodotto.
- Non utilizzare con barbe, peli del viso o con altre condizioni che impediscano una buona tenuta tra il viso e il bordo della mascherina.
- Gli individui con malattie respiratorie, malattie cardiovascolari o donne in gravidanza dovrebbero usare questo prodotto con cautela.
- Evitare di utilizzare quando la mascherina è danneggiata, sporca o la respirazione diventa difficile, lasciare l'area contaminata e sostituire la mascherina.

UTILISATION

L'utilisation du masque de protection est conseillée voire obligatoire lorsque votre travail ou votre environnement de travail comporte un risque de non protection et non aérosols liquides non toxiques.

USO

L'uso di una mascherina protettiva è consigliata e addirittura obbligatoria quando il tuo lavoro o il tuo ambiente di lavoro comporta dei rischi legati alla presenza di polvere e di aerosol liquidi non tossici.

CONTRE-INDICATIONS

Le produit contient des fibres non tissées. À utiliser avec caution en cas d'allergie à questo materiale.

CONTROINDICAZIONI

Il prodotto contiene tessuto non tessuto. Da usare con cautela in caso di allergia a questo materiale.

CONTROLE DE L'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Contrôle de la pression positive: appuyez doucement sur le masque avec les deux mains, puis expirez. L'air ne devrait pas sortir des bords du masque.

Contrôle de la pression négative: appuyez doucement sur le masque avec les deux mains, puis inspirez. Le centre du masque doit légèrement s'affaisser.

Se cas de fuite, ajuster la position de la barrette nasale et vérifiez à nouveau.

CONTROLO DELLA TENUTA DELL'ARIA

Controllo della pressione positiva: premere delicatamente la mascherina con entrambe le mani, quindi espirare. Non dovrebbero esserci perdite d'aria dai bordi della mascherina.

Controllo della pressione negativa: premere delicatamente la mascherina con entrambe le mani, quindi inspirare. Il centro della mascherina dovrebbe essere leggermente affossato.

In caso di perdita, regolare la posizione del nastro e ricontrollare.

ENTREPOSAGE

Le produit doit être stocké dans un environnement sec, propre et bien ventilé, exempt de gaz corrosif, à l'abri du soleil et des flammes libres.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, pulito e ben ventilato, privo di gas corrosivi, al riparo dal sole e da fiamme libere.

Importé par Ribimex SA
56 Route de Paris - RN4 -
FR-77340 PONTAULT-COMBAULT
Fabriqué en R.P.C. -
N° de lot :

Particle Filtering Half Mask
EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR
TK-3

Importé par Ribimex SA
56 Route de Paris - RN4 -
FR-77340 PONTAULT-COMBAULT
Fabriqué en R.P.C. -
N° de lot :

Anhui Tiangkang Medical Technology Co., Ltd.
No. 228 Wuyi Road, Economic Development Zone,
Tianchang City, 239300 Anhui, China









EC REP POLSKI REJESTRATYKOW S.A.
Al. Gen. Józefa Hallera 12680-416 GDANSK, Poland

www.ribimex.com

www.ribimex.com CE 1463




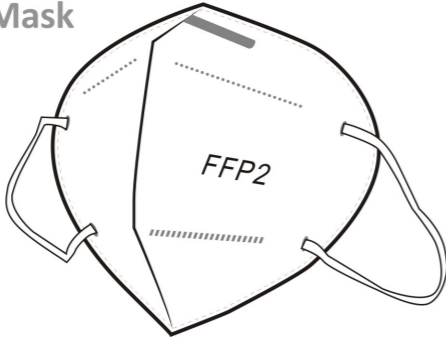
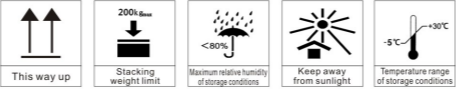







www.ribimex.com CE 1463

FH020-1036#FFP2口罩说明书

USERS INFORMATION – NON-REUSABLE PARTICLE FILTERING MASK (EN149:2001+A1:2009)	INFORMATIONS A DESTINATION DES UTILISATEURS – MASQUE ANTIPOUSSIÈRES NON RÉUTILISABLE (EN149:2001+A1:2009)	INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE – MASCHELINE ANTIPOLVERE MONOUSO (EN149:2001+A1:2009)
Description : Non-reusable particle filtering mask Description : Masque antipoussières non réutilisable Descrizione : Mascherine antipolvere monouso Ref. / Réf. / Rif. : PRPROTMP02 (533070), PRPROTMP02X20 (533076) Model / Modèle / Modello : TK-3 FFP2 NR Requirements / Référence normative / Requisti : TK-3 FFP2 NR Standard / Norme / Norma : Règlement (UE) 2016/425 / Règlement (UE) 2016/425 : EN 149:2001+A1:2009	Description : Non-reusable particle filtering mask Description : Masque antipoussières non réutilisable Descrizione : Mascherine antipolvere monouso Ref. / Réf. / Rif. : PRPROTMP02 (533070), PRPROTMP02X20 (533076) Model / Modèle / Modello : TK-3 FFP2 NR Requirements / Référence normative / Requisti : TK-3 FFP2 NR Standard / Norme / Norma : Règlement (UE) 2016/425 / Règlement (UE) 2016/425 : EN 149:2001+A1:2009	Description : Non-reusable particle filtering mask Description : Masque antipoussières non réutilisable Descrizione : Mascherine antipolvere monouso Ref. / Réf. / Rif. : PRPROTMP02 (533070), PRPROTMP02X20 (533076) Model / Modèle / Modello : TK-3 FFP2 NR Requirements / Référence normative / Requisti : TK-3 FFP2 NR Standard / Norme / Norma : Règlement (UE) 2016/425 / Règlement (UE) 2016/425 : EN 149:2001+A1:2009
EN Use The use of a protective mask is recommended or even compulsory when your work or your work environment involves a risk related to dust and non-toxic liquid aerosols.	FR Utilisation L'utilisation du masque de protection est conseillée voire obligatoire lorsque votre travail ou votre environnement de travail comporte un risque lié aux poussières et aux aérosols liquides non toxiques.	IT Uso L'uso di una mascherina protettiva è consigliato o addirittura obbligatorio quando il tuo lavoro o il tuo ambiente di lavoro comporta dei rischi legati alla presenza di polvere e di aerosol liquidi non tossici.
Contraindications This product contains non-woven fabrics. Use with caution for those is allergic to this material.	Contraindications Le produit contient des tissus non tissés. À utiliser avec prudence pour ceux qui sont allergiques aux tissus non-tissés.	Contraindicazioni Il prodotto contiene tessuto non tessuto. Da usare con cautela in caso di allergia a questo materiale.
Use Instruction  <p>Step 1: Remove the mask from the individual packaging, make sure the nose bar is positioned at nose level and facing out.</p> <p>Step 2: Place the mask on your nose and mouth. Place the loops securely around the ears.</p> <p>Step 3: Gently press the nose clip to fit the bridge of the nose, then adjust the mask to cover the nose, mouth, and chin.</p>	Instructions D'utilisation  <p>Étape 1: Retirez le masque de l'emballage individuel, assurez-vous que la barrette nasale est positionnée au niveau du nez et tournée vers l'extérieur.</p> <p>Étape 2: Placez le masque sur votre nez et votre bouche. Placez les boucles en toute sécurité autour des oreilles.</p> <p>Étape 3: Appuyez doucement sur la barrette nasale pour l'adapter à l'arête du nez, puis ajustez le masque pour vous assurer qu'il couvre le nez, la bouche et le menton.</p>	Istruzioni Per L'uso  <p>Passaggio 1: rimuovere la mascherina dalla confezione singola, assicurarsi che il nasello sia posizionato sul naso e rivolto verso l'esterno.</p> <p>Passaggio 2: posizionare la mascherina sul naso e sulla bocca. Posizionare saldamente gli elastici intorno alle orecchie.</p> <p>Passaggio 3: premere delicatamente il nasello per adattarlo al ponte del naso, quindi effettuare la regolazione per assicurarsi che la mascherina copra il naso, la bocca e il mento.</p>
Airtight Check  <p>Positive pressure control: gently press on the mask with both hands, then exhale. Air should not come out of the edges of the mask.</p> <p>Negative pressure control: gently press on the mask with both hands, then inhale. The center of the mask should sink in slightly.</p> <p>If there is a leak, adjust the position of the nose clip and check again.</p>	Contrôle de l'étanchéité L'air  <p>Contrôle de la pression positive: appuyez doucement sur le masque avec les deux mains, puis expirez. L'air ne devrait pas sortir des bords du masque.</p> <p>Contrôle de la pression négative: appuyez doucement sur le masque avec les deux mains, puis inspirez. Le centre du masque doit légèrement s'enfoncer.</p> <p>En cas de fuite, ajustez la position de la barrette nasale et vérifiez à nouveau.</p>	Controllo della Tenuta Dell'aria  <p>Controllo della pressione positiva: premere delicatamente la mascherina con entrambe le mani, quindi espirare. Non dovrebbero esserci perdite d'aria dai bordi della mascherina.</p> <p>Controllo della pressione negativa: premere delicatamente la mascherina con entrambe le mani, quindi inspirare. Il centro della mascherina dovrebbe essere leggermente infossato.</p> <p>In caso di perdita, regolare la posizione del nasello e ricontrrollare.</p>
Caution <ul style="list-style-type: none"> This product is suitable for respiratory protection against certain particles. Misuse can lead to disease or even death. Read and understand this manual before use. Check the expiration date before use, do not use after expiration. Check the integrity of the product and package before use. Do not use if damaged. Do not use for spray painting, in the presence of harmful gas, asbestos, or when sanding. Restrictions on use: <ul style="list-style-type: none"> This product does not supply oxygen. Do not use in atmosphere with oxygen level lower than 19.5%. Always check with supervisory personnel to ensure that you are being given proper protection in relation to your working conditions. Consult relative European or local standards. Do not modify, deteriorate, clean, or misuse this product. Do not use with beards or other situations that prevent a sealing between face and mask surface. People with respiratory, cardiovascular diseases or pregnancy should use this mask with caution. Duration of use: when the mask is damaged, soiled or breathing becomes difficult, replace with a new mask. 	ATTENTION <ul style="list-style-type: none"> Ce produit doit être utilisé uniquement en tant que protections respiratoires de certaines particules. Une mauvaise utilisation peut être cause de maladie, voir entraîner la mort. Lisez et comprenez les instructions avant utilisation. Reportez-vous à la date d'expiration imprimée sur l'emballage. Ne pas utiliser après la date d'expiration. Vérifiez l'intégrité du produit et de l'emballage avant utilisation. S'il est endommagé, jetez-le. Ne pas utiliser pour pulvériser de la peinture, en présence de gaz et vapeurs nocifs, d'amiante, ou lors de sablage. Limitations d'utilisation: <ul style="list-style-type: none"> Ce produit ne fournit pas d'oxygène. Ne pas utiliser dans des atmosphères avec un niveau d'oxygène inférieur à 19,5%. Vérifier toujours avec du personnel habilité pour vous assurer que vous possédez la bonne protection pour vous protéger dans votre environnement de travail. Veuillez consulter les normes européennes ou nationales s'y rapportant. Ne modifiez pas, ne détériorez pas, ne nettoyez pas ou n'utilisez pas ce produit à mauvais escient. Ne pas utiliser avec des barbes ou d'autres situations qui empêchent une bonne étanchéité entre le visage et la surface du masque. Les personnes souffrant de maladies respiratoires, cardiovasculaires ou enceintes doivent utiliser ce produit avec prudence. Durée d'utilisation: lorsque le masque est endommagé, souillé ou que la respiration devient difficile, quittez la zone contaminée et remplacez le masque. 	ATTENZIONE <ul style="list-style-type: none"> Questo prodotto aiuta a proteggere le vie respiratorie da alcuni particolati contaminanti. Un uso improprio può essere causa di malattia o portare alla morte. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Fare riferimento alla data di scadenza stampata sulla confezione. Non utilizzare dopo la scadenza. Verificare l'integrità del prodotto e della confezione prima dell'uso. Se danneggiato, scartare. Non utilizzare per spruzzare vernici, in presenza di gas e vapori nocivi, di amianto, o per lavori di sabbiatura. Limitazioni d'uso: <ul style="list-style-type: none"> Questo prodotto non fornisce ossigeno. Non utilizzare in atmosfere con un livello di ossigeno inferiore al 19,5%. Controllare sempre con il personale autorizzato che la protezione sia adeguata al vostro ambiente di lavoro. Consultare per questo le relative norme europee o nazionali. Non alterare, danneggiare, lavare o utilizzare in modo improprio questo prodotto. Non utilizzare con barba, pelli del viso o con altre condizioni che impediscano una buona tenuta tra il viso e il bordo della mascherina. Gli individui con malattie respiratorie, malattie cardiovascolari o donne in gravidanza dovrebbero usare questo prodotto con cautela. Durata di utilizzo: quando la mascherina è danneggiata, sporca o la respirazione diventa difficoltosa, lasciare l'area contaminata e sostituire la mascherina.
Storage The product must be stored in a dry, clean and well-ventilated environment, free from corrosive gas, protected from the sun and open flames.	ENTREPOSAGE Le produit doit être stocké dans un environnement sec, propre et bien ventilé, exempt de gaz corrosifs, à l'abri du soleil et des flammes nues.	CONSERVAZIONE Il prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto, pulito e ben ventilato, privo di gas corrosivi, al riparo dal sole e da fiamme libere.
Certification The "CE" attestation was issued by the POLSKI REJESTR STATKOW S.A., Notified Body No. 1463.	Certificat L'attestation «CE» a été délivrée par POLSKI REJESTR STATKOW S.A., Organisme Notifié No. 1463.	Certificato Il marchio "CE" è stato rilasciato da POLSKI REJESTR STATKOW S.A., Ente Notificato N. 1463.
 Anhui Tiankang Medical Technology Co., Ltd. No. 228 Weiye Road, Economic Development Zone, Tianshang City, 239300 Anhui, China	https://www.rhimex.fr/	 POLSKI REJESTR STATKOW S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 228&0-415 GDANSK, Poland
Manual (V1_2020-12-08)		

技术要求
 材质：70g书写纸
 颜色：黑色
 尺寸：103x168mm
 3只装每袋一张
 1只装每盒一张

FH020-1036#FFP2口罩3只

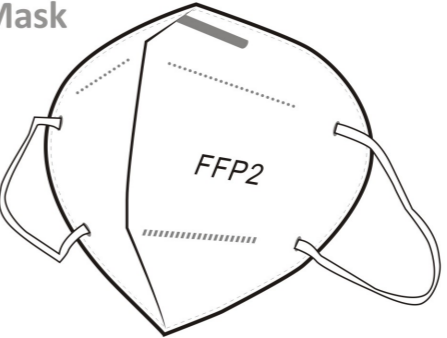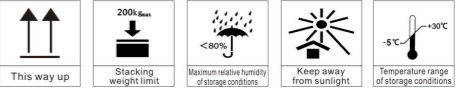 <p>Masque Antipoussières Mascherine Antipolvere</p> <p>Particle Filtering Half Mask EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR</p> <p>NON-MEDICAL</p> <p>TK-3  1050PCS  1463</p> 	 <p>The product should be stored in a non-corrosive gas, dry, avoid the sun, good ventilation and clean environment, away from open fire.</p> <table border="1"> <tr><td>LOT</td><td>R20100212</td></tr> <tr><td>Stacking weight limit</td><td></td></tr> <tr><td>Qty</td><td>1050pcs</td></tr> <tr><td>G.W.</td><td>kg</td></tr> <tr><td>N.W.</td><td>kg</td></tr> <tr><td>MEAS.</td><td>73x68x46.5cm</td></tr> </table> <p>Anhui Tiankang Medical Technology Co., Ltd. No. 228 Weiyi Road, Economic Development Zone, Tianchang City, 239300 Anhui, China</p> <p>Ref.PPROMP02  13700194422018</p>	LOT	R20100212	Stacking weight limit		Qty	1050pcs	G.W.	kg	N.W.	kg	MEAS.	73x68x46.5cm	 <p>Masque Antipoussières Mascherine Antipolvere</p> <p>Particle Filtering Half Mask EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR</p> <p>NON-MEDICAL</p> <p>TK-3  1050PCS  1463</p> 	 <p>The product should be stored in a non-corrosive gas, dry, avoid the sun, good ventilation and clean environment, away from open fire.</p> <table border="1"> <tr><td>LOT</td><td>R20100212</td></tr> <tr><td>Stacking weight limit</td><td></td></tr> <tr><td>Qty</td><td>1050pcs</td></tr> <tr><td>G.W.</td><td>kg</td></tr> <tr><td>N.W.</td><td>kg</td></tr> <tr><td>MEAS.</td><td>73x68x46.5cm</td></tr> </table> <p>Anhui Tiankang Medical Technology Co., Ltd. No. 228 Weiyi Road, Economic Development Zone, Tianchang City, 239300 Anhui, China</p> <p>Ref.PPROMP02  13700194422018</p>	LOT	R20100212	Stacking weight limit		Qty	1050pcs	G.W.	kg	N.W.	kg	MEAS.	73x68x46.5cm
LOT	R20100212																										
Stacking weight limit																											
Qty	1050pcs																										
G.W.	kg																										
N.W.	kg																										
MEAS.	73x68x46.5cm																										
LOT	R20100212																										
Stacking weight limit																											
Qty	1050pcs																										
G.W.	kg																										
N.W.	kg																										
MEAS.	73x68x46.5cm																										

技术要求
 材质：瓦楞纸，外面纸为B级牛皮纸250±5g，
 A/B级瓦楞130±5g双面施胶加强，
 夹心为130±5g，里纸为B级牛皮纸190±5g
 颜色：黑色+50%黑色
 尺寸：730x680x465mm/1050pcs
 注：
 批号/生产期根据实际生产进行印刷或者喷码